


INSTRUCCIONES DE USO

Este documento no tiene como objeto reemplazar ni sustituir las instrucciones de uso del sistema NanoScope. El usuario debe leer las instrucciones de uso del sistema NanoScope antes de utilizar el dispositivo. Las Instrucciones de uso contienen las indicaciones y contraindicaciones de uso, advertencias, definiciones de símbolos y la lista completa de instrucciones del producto. Además de venir incluido con el sistema NanoScope, este documento también puede consultarse en Arthrex.com.

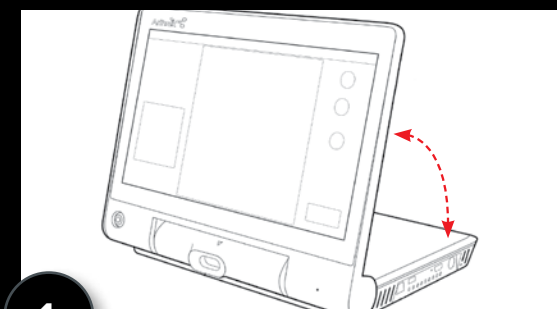

1

Coloque la consola NanoScope en una superficie plana, estable y no resbaladiza. Ajústela del modo que mejor se adapte al procedimiento.




2

Sitúe la consola próxima a la zona de contacto con el paciente fuera del campo estéril previsto.



3

Conecte el adaptador de corriente o asegúrese de que el nivel de batería es suficiente para la duración prevista del procedimiento.

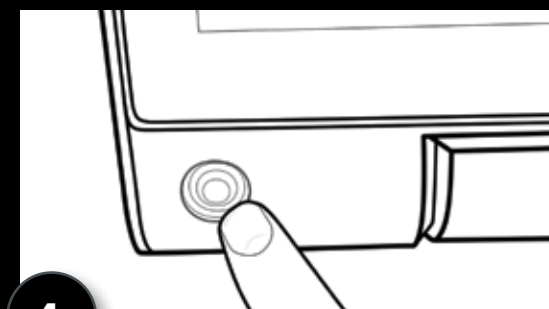


4

Encienda la consola y compruebe que la luz verde está encendida. Introduzca sus credenciales y los datos demográficos del paciente, o conecte la cámara NanoScope para un inicio rápido.



5

Prepare el campo estéril y abra el kit del cabezal NanoScope.
(Utilice guantes quirúrgicos).

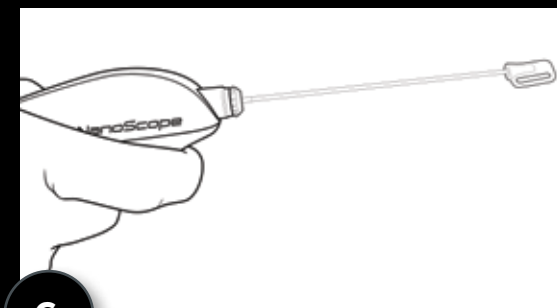

6

Asegúrese de que la tapa de calibración está en su sitio.


(Mantenga el campo estéril para los pasos siguientes).



7


Inserte el extremo del conector del cabezal en la consola NanoScope y encájelo totalmente.

(Nota: la consola no es estéril).

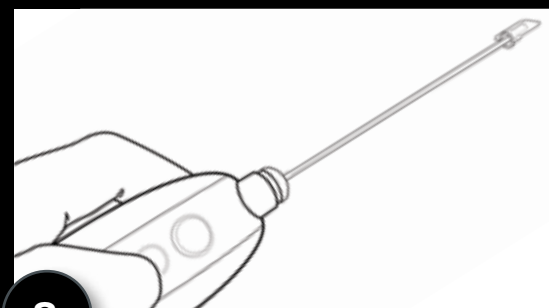

8


Haga la calibración pulsando cualquier botón del cabezal cuando se solicite. Asegúrese de que la tapa está instalada.

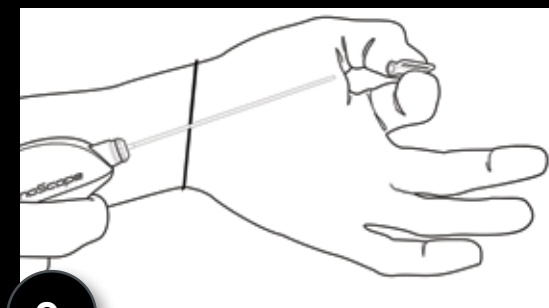

9


Retire la tapa de la cámara y colóquela en el campo estéril.

(Nota: no deseche la tapa hasta terminar el procedimiento. La tapa puede utilizarse para recalibrar).

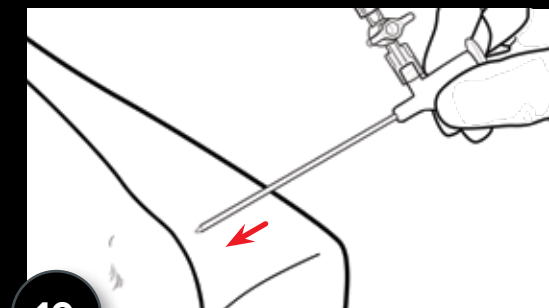


10

Inserte el trocar/obturador en la cánula e introdúzcala en la articulación/cavidad.

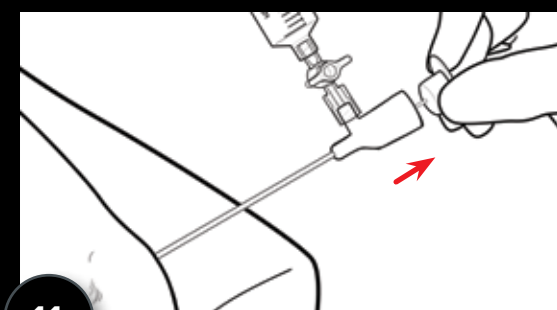


11

Retire el trocar/obturador y deje la cánula colocada. Conecte la gestión de fluidos (si se desea).

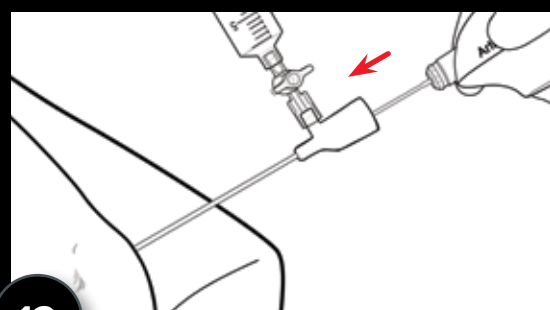


12

Inserte el hipotubo del cabezal NanoScope en la cánula y encájelo en su sitio.

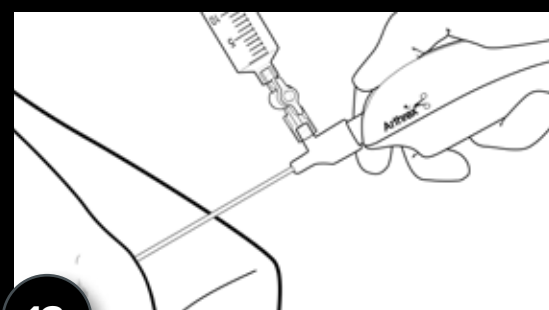

13


Manipule el cabezal NanoScope para visualizar la anatomía interior. Administre líquido según sea necesario como ayuda para la visualización.

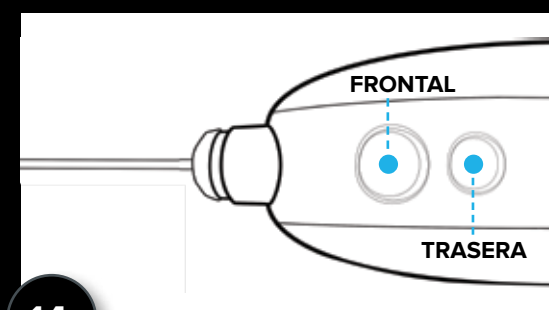

14

Utilice los botones del cabezal NanoScope para capturar imágenes y videos.

(Ajuste predeterminado: frontal = captura de imágenes, trasera = captura de vídeo)

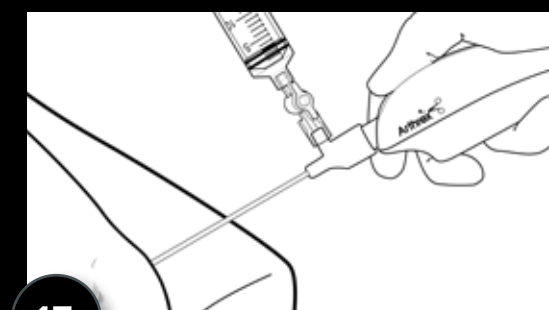

15

Al finalizar, aspire la cavidad/espacio articular y utilice la(s) jeringa(s) para eliminar el fluido introducido.

NanoScope

Sistema de artroscopia



16



Al terminar el procedimiento, deseche el kit de cabezal NanoScope y sus accesorios en un contenedor para residuos cortopunzantes con riesgo biológico.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

El sistema artroscópico de imágenes NanoScope™ permite a los profesionales médicos realizar una artroscopia de diagnóstico utilizando una cámara descartable conectada a una tablet HD portátil.

Arthrex, Inc.
1370 Creekside Blvd.
Naples, FL 34108-1945
(EE. UU.)
1-800-934-4404
www.arthrex.com

Soporte técnico de Arthrex
1-888-420-9393

Para devolver o reparar el dispositivo,
contacte con el departamento de
control de productos de Arthrex
1-866-267-9138



© 2020 Arthrex, Inc. Todos los derechos reservados.
DFU-0338-SUBr0

