

# Instrumentación para Nano artroscopia





## Nano instrumentación

### El tamaño importa en la resección artroscópica

Introducción de nano instrumentación artroscópica estéril de un solo uso.

Con 20 años de excelencia diseñando instrumentación manual artroscópica, Arthrex fabrica la nueva generación de instrumentos para procedimientos de diagnóstico, resección y extracción.

NanoProbe es un gancho probador en forma de gancho retráctil articulado utilizado en los procedimientos de diagnóstico. El NanoBiter, NanoScissor y NanoGrasper son instrumentos artroscópicos de resección de tejido blando. Con solamente 2 mm de diámetro, están diseñados para la inserción atraumática a través de espacios articulares estrechos. Estos instrumentos son afilados y están diseñados para reseca eficientemente tejido meniscal y otras estructuras de tejido blando.

### Características y ventajas

#### ■ Nano instrumentación de 2 mm

- Diseñada para su uso en salas de operaciones, salas de procedimientos o en consultorios.
- Se pueden utilizar con un artroscopio tradicional de 4 mm, con ópticas de pequeñas articulaciones o con el sistema NanoScope™ de 1,9 mm.
- Disponible en longitudes estándar (130 mm) o pequeñas articulaciones (70 mm).

#### ■ Resección atraumática más efectiva


- El diseño de bajo perfil permite un mejor acceso a patologías difíciles de alcanzar sin sacrificar la calidad de la resección.
- El adecuado diseño de un solo uso permite que exista un afilado inigualable que asegura la resección óptima en cada procedimiento.
- Suministrado estéril para que cada paciente tenga un instrumento limpio y preciso.

### Información para pedidos




Procedimientos de rodilla, hombro y cadera	N.º de parte
NanoProbe, desechable	AR-10100N
NanoGrasper, recto, 130 mm, desechable	AR-10913D-1
NanoScissor, recto, 130 mm, desechable	AR-10915D-1
NanoBiter, recto, 130 mm, desechable	AR-10911D-1
NanoBiter, 15° hacia arriba, 130 mm, desechable	AR-10922D-1

Procedimientos para articulaciones pequeñas	N.º de parte
NanoProbe, desechable	AR-10100N
Sonda para articulaciones pequeñas, reutilizable	AR-30000
NanoBiter, recto, 70 mm, desechable	AR-10901D-1
NanoBiter, 15° hacia arriba, 70 mm, desechable	AR-10902D-1
NanoGrasper, recto, 70 mm, desechable (envase único)	AR-10903D-1
NanoScissor, recto, 70 mm, desechable (envase único)	AR-10905D-1

Instrumento NanoBiter

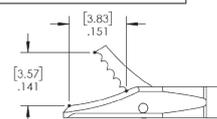

Pieza sacabocados recta de 3,4 mm

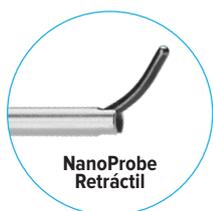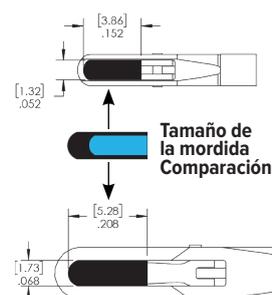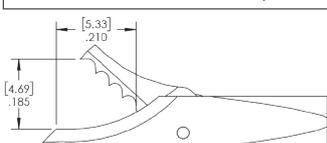

Para más información sobre la instrumentación nanoartroscópica o el sistema artroscópico NanoScope, póngase en contacto con el representante local de Arthrex o visite [Arthrex.com](http://Arthrex.com).

[www.arthrex.com](http://www.arthrex.com)

© 2019 Arthrex, Inc. Todos los derechos reservados. FL1-000036-es-NT\_B

