

Sistema NEBULAE[®] I

Mejore su laparoscopia



Rápida eliminación del humo con el set de tubería de evacuación de alto flujo de humo NEBULAE®

El set de tubería de evacuación de humo funciona con el set de tubería de medición de presión NEBULAE TAP y un sistema de succión para eliminar humo de manera continua, lo que permite que el personal de quirófano opere en un campo quirúrgico despejado.

- Elimina rápidamente el humo hasta a 20 LPM con neumo estable^{1,2}
- Funciona con dispositivos de succión fijos o portátiles
- Elimina el 99,999 % de partículas mayores a 0,12 micras que supone un riesgo sanitario para el personal de quirófano

Evita que el endoscopio se empañe

Calentador reutilizable de CO₂ en línea

El calentador de CO₂ en línea NEBULAE elimina el empañamiento del endoscopio, lo que permite que los cirujanos obtengan una vista del campo quirúrgico limpia sin obstrucciones.




Set de tubería de medición de presión NEBULAE TAP

- Controla continuamente la presión del neumoperitoneo sin interrumpir el flujo de CO₂
- Estabiliza el neumo durante los procedimientos laparoscópicos que precisen una evacuación rápida de humo
- Minimiza la necesidad de ajustar los brazos robóticos y el instrumental por la pérdida del neumo



Set de tubería de insuflación de alto flujo NEBULAE

- Brinda 50 LPM de flujo de CO₂ hasta el extremo final del set de tubería
- Filtro hidrofóbico, 0,12 micras ULPA con una eficiencia del 99,999 %
- Asegura un desempeño y calidad constantes tanto en el extremo distal como el proximal durante la administración de CO₂

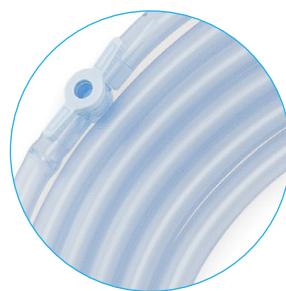

Set de tubería de evacuación de alto flujo de humo NEBULAE

- Elimina rápidamente el humo hasta a 20 LPM^{1,2}
- Funciona con dispositivos de succión fijos o portátiles
- Elimina el 99,999 % de particulado mayor de 0,12 micras



Calentador de CO₂ en línea NEBULAE

- Calienta el CO₂ de insuflación cerca del punto de entrada
- Administra CO₂ a una temperatura similar a la corporal
- Es compatible con tasas de flujo de hasta 50 LPM
- Reutilizable hasta 100 veces con la limpieza y esterilización adecuadas
- Evita que el endoscopio se empañe si el CO₂ está frío

¹ Northgate Technologies, Inc. Información en archivo (NOR-DOC-DN-0106). Elgin, IL; 2019.

² Para su uso con el set de tubería de detección NEBULAE TAP

Información para pedidos

Producto	Descripción	Cantidad	Número de parte
Sistema NEBULAE® I, insuflador	50 l por minuto, insuflador de alto flujo	1	7-650-00
Set de tubería de insuflación de alto flujo NEBULAE	Filtro hidrofóbico, 0,12 µ ULPA con una eficiencia del 99,999 %. Largo: 10 pies (3 m)	10 unidades/caja, estéril	7-510-52
Set de tubería de detección NEBULAE TAP	Largo: 10 pies (3 m)	10 unidades/caja, estéril	7-510-31
Set de tubería de evacuación de alto flujo de humo NEBULAE	Filtro hidrofóbico, 0,12 µ ULPA con una eficiencia del 99,999 %. Largo: 15 pies (4,5 m)	10 unidades/caja, estéril	7-510-60
Calentador de CO2 en línea NEBULAE	Calentador en línea, cable del ensamble del calentador y cepillos de limpieza. Largo: 10 pies (3 m)	1	6-820-00

Esta descripción de la técnica es una herramienta didáctica y una ayuda médica para profesionales médicos debidamente capacitados en el uso de productos específicos de Arthrex. Como parte del uso profesional, el médico debe atender a su juicio como profesional a la hora de tomar sus propias decisiones sobre la técnica y el uso del producto. Al hacerlo, el médico debe basarse en su formación y experiencia profesionales, y revisar de manera exhaustiva la bibliografía médica pertinente y las instrucciones de uso del producto. El abordaje posoperatorio es totalmente personalizable y depende de la evaluación del profesional a cargo del tratamiento. Los resultados individuales pueden variar y no todos los pacientes presentarán el mismo nivel de actividad posoperatoria ni los mismos resultados.

Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados, ya que la disponibilidad del producto está sujeta a las aprobaciones normativas y prácticas médicas de cada mercado. Comuníquese con Arthrex en caso de duda sobre la disponibilidad de los productos en su región.

Consulte la información de patentes en EE. UU. en www.arthrex.com/corporate/virtual-patent-marking

Para obtener más información sobre Northgate Technologies, Inc. Llame al 1-800-348-0424 dentro de los EE. UU. | 01-847-608-8900 Fax: 01-847-608-9505 fuera de los EE. UU.

Visite ntisurgical.com/products/insufflation | Correo electrónico customerservice@ntisurgical.com

Northgate® Technologies, Inc. es una empresa ubicada en los Estados Unidos y/® son marcas registradas o están sujetas a licencia de Northgate, NTI, NEBULAE Technologies, Inc. © 2021 Northgate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

arthrex.com

© 2022 Arthrex, Inc. Todos los derechos reservados. FL1-000403-es-NT_A

